细胞遗传质量鉴定检测 Cell Line Authentition Service

STR 基因型检测报告

样品信息

样品编号:

客户样本编号	公司编号
20210106-37	20210106-37

样品数量:1

样品性状:细胞系

检测项目:STR

送检单位:厦门逸漠生物科技有限公司

检测方法:用TIANGEN的基因组抽提试剂盒提取DNA,采用23-STR扩增方案扩增,在ABI 3130XL型遗传分析仪上对STR位点和性别基因Amelogenin、Yindel进行检测。

检测结果

(一) 检验基本情况

	多等位基因	匹配细胞系	细胞库	EV 值	匹配说明
20210106-37	有	NALM-6	DSMZ	0.94	基本匹配

样本基因型检验结果

- 多等位基因指三等位及以上基因现象。
- 本次检测各细胞分型结果良好。

(二) 各样本描述

● <u>20210106-37</u>:该株细胞DNA 分型在细胞系检索中找到<u>基本匹配</u>的细胞系,DSMZ 数据库显示细胞名为 NALM-6,细胞号对应 RCB1933。本次检测在该细胞系中发现多等位基因。

备注:待测细胞系与收录于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的细胞系 STR 数据进行比对,未收录于以上细胞库的细胞系将无法匹配。

(三)样本分型结果

细胞20210106-37的 STR 位点和Amelogenin 、Yindel位点的基因分型结 果									
送检细胞 STR 信息 细胞库细胞 STR 信息									
Loci	送村	金细胞名:202	210106-37	细胞库细胞名:NALM-6					
	Allele1	Allele2	Allele3	Allele1	Allele2	Allele3			
Yindel	2								
AMEL	Х	Υ		Х	Y				

D3S1358	16	17				
D13S317	9	13		9	13	
D7S820	8	11. 1		8	11	
D16S539	10	11		10	11	
D8S1179	12	13				
Penta D	8	14				
D19S433	13	15				
D5S818	11	12		11	12	
D21S11	27	29				
TPOX	8	10		8	10	
D1S1656	11	17				
D6S1043	11	13				
D2S441	10	13	14			
D12S391	20	21				
D2S1338	17	24				
vWA	15	16		15	16	
Penta E	11	11				
THO1	8	9		8	9	
D18S51	12	15				
CSF1P0	13	13		13	13	
FGA	22	23				

其他说明

(一) 分型方案及位点分布


	方案 1	方案 2	方案 3	方案 4
1	Yindel	D19S433	D2S411	TH01
2	AMEL	D5S818	D12S391	D18S51
3	D3S1358	D21S11	D2S1338	CSF1PO
4	D13S317	TPOX	VWA	FGA
5	D7S820	D1S1656	PENTAE	
6	D16S539	D6S1043		
7	D8S1179			
8	PENTAD			

实验方案及位点

(二) STR数据库比对

本公司采用 DSMZ tools 进行细胞系比对,其中包含来自于 ATCC, DSMZ, JCRB 和 RIKEN 数据库的2455个细胞系STR数据。如果待检测细胞未收录于以上细胞库或这是自行建立的新细胞系将无法进行比对,用户需根据细胞分型结果自行与其他数据库进行比对。

签发日期:2021年01月25日

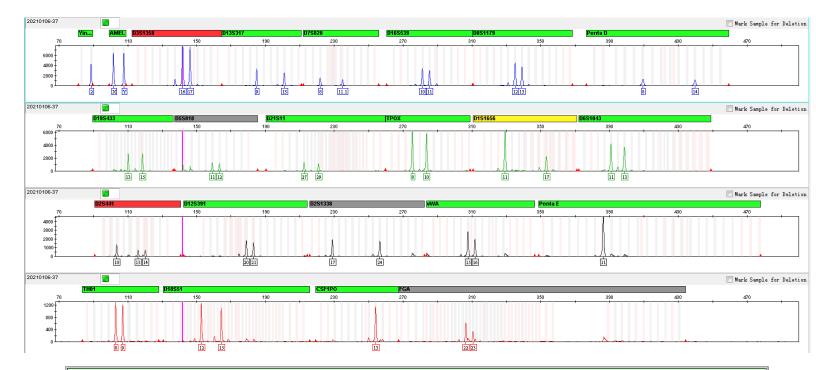

Result of STR matching analysis by your data.

- DSMZ Profile Database -

A graphical presentation is shown at the bottom of this page.

	Cell No.	Cell name	Locus names									
EV Cell I	Cell No.		D5S818	D13S317	D7S820	D16S539	VWA	TH01	AM	TPOX	CSF1PO	Figures
	Query	(Your Cell)	11,12	9,13	8,11.1	10,11	15,16	8, 9	x,y	8,10	13,13	
0.94(34/36)	RCB1933	NALM-6	11,12	9,13	8,11	10,11	15,16	8, 9	X,Y	8,10	13,13	-
0.70(28/40)	128	NALM-6	11,12 ,10	9,12,8	8,10,9	10 , 11 ,9	15,16	8,9	X,Y	8,10	12,12	-
0.67(24/36)	CRL-7526	Hs 795.Pl	11,12	8,11	8 ,10	8,11	15,16	8, 9	X,Y	8,10	10,10	-
0.61(22/36)	CCL-138	Detroit 562	11,12	12,12	8 ,10	11,11	16 ,16	8, 9	X,X	8,10	11,13	-
0.61(22/36)	CRL-2421	MDA PCa 2a	12 ,13	11,12	8 ,10	10,11	15,16	8, 9	X,Y	8,11	10,12	-