

流式染色检测报告

Flow cytometry staining report

样品信息

样品编号：

客户样本编号	公司编号
	SKOV3-GFP-FLUC-puro

样品数量：1

样品性状：细胞

检测项目：流式细胞术

送检单位：厦门逸漠生物科技有限公司

说明

1. 本报告仅对所提供样本的检测结果负责，不代表其他样本或批次。
2. 报告中的检测结果及检测单位名称未经授权，不得用于任何形式的广告、评比、认证或商业宣传。
3. 如对本报告内容有异议，请在收到报告之日起十五个工作日内以书面形式提出，逾期将不予受理。
4. 对于任何未经授权的涂改、增删或未加盖检测单位正式印章的报告复印件，本单位均不承担任何法律责任。
5. 本报告的检测结果仅供参考，最终解释权归检测单位所有。
6. 报告一旦发出，未经检测单位书面同意，不得以任何形式进行复制或分发。
7. 请妥善保管本报告，如有遗失或损坏，检测单位不负责重新出具。
8. 检测单位保留对本报告内容进行更新和修订的权利，以确保检测标准和方法的准确性和时效性。

签发日期：2024年11月8日



1. 摘要

本项目基于流式细胞技术可以用于分析细胞膜蛋白和胞内蛋白的表达。

2. 样品编号

样品编号	样品描述
SKOV3-GFP-FLUC-puro	人卵巢癌细胞(GFP/FLUC 标记)

3. 实验材料描述

3.1 主要试剂

试剂名称	试剂来源	cat.No
2% BSA in PBS	Antihela	-


3.2 主要仪器及器材

仪器名称	仪器来源	cat. No.
NovoCyte™ Flow Cytometer	ACEA	1300
离心机	湘仪	TG16-W

4. 实验步骤

贴壁细胞需要胰酶消化，悬浮细胞直接收集离心。弃上清，加入 100 μ L PBS 重悬细胞，取 10^6 个细胞/100 μ L 于流式管中，离心去掉缓冲液。选择 FITC 通道，上机，使用亲本株的区域门，得到实验结果。

5. 实验结果

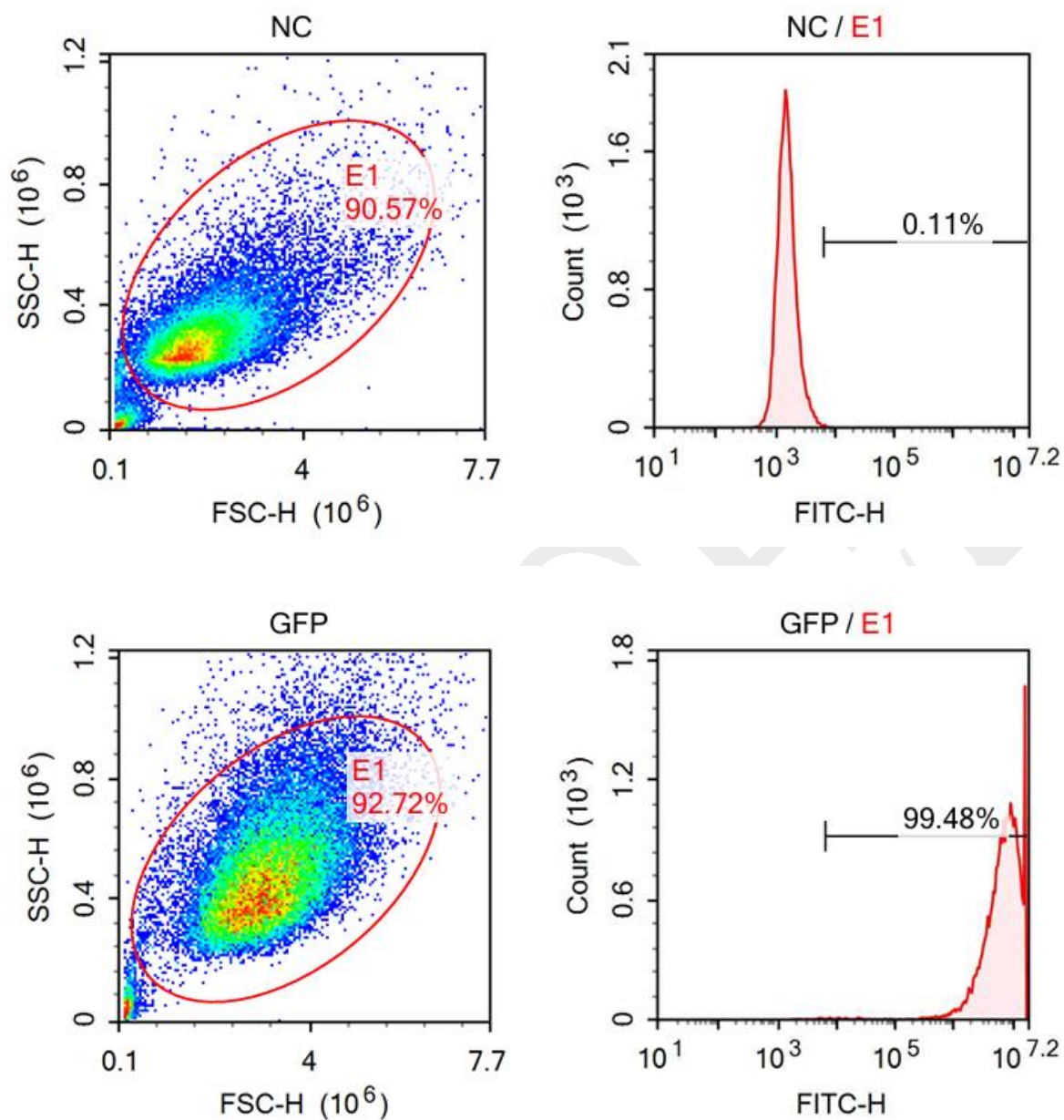

6. 实验结论

SKOV3-GFP-FLUC-puro 细胞表达 GFP。GFP 阳性率为 99.48%。